

# Beurer MG 70 – Infračervený masážny prístroj

## Návod na použitie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.

Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje.

So srdečným pozdravom,


Váš tím Beurer



### 1. Dôležité upozornenia

- Pripájajte prístroj vždy len na sieťové napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku.
- Ako pri každom elektrickom prístroji, aj tento masážny prístroj je potrebné používať pozorne a obozretne, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom:
  - Sieťový kábel vypnite bezprostredne po použití.
  - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia pomocou zľahka navlhčenej handry!).
- Voda sa nikdy nesmie dostať do vnútra prístroja. Nikdy prístroj neponárajte pod vodu. V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj vo vani, pod sprchou, v bazéne alebo nad umývadlom, naplneným vodou. V prípade, že voda napriek tomu vnikla do vnútra, vypnite prístroj okamžite zo siete a obráťte sa na svojho predajcu elektro alebo zákaznícky servis.
- Prístroj a najmä sieťový kábel je potrebné pred každým použitím skontrolovať, či nie je poškodený.
- Pri poškodení sieťového kábla v žiadnom prípade nezapájať do siete. Obráťte sa na svojho predajcu elektro alebo zákaznícky servis.
- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
- Nedržte a nenoste prístroj za kábel.
- V prípade, že sa počas používania vyskytne porucha, ihneď prístroj vypnite, a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj je určený na účel, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže ručiť za škody, ktoré vzniknú neodborným alebo nepremysleným používaním.
- Nepoužívajte žiadne iné nastavce, iba spolu dodávané masážne nastavce.
- Prístroj je určený len na vlastné použitie, nie je určený pre medicínske alebo komerčné použitie.
- Nepoužívajte prístroj bez prerušenia dlhšie ako 20 minút, aby ste zabránili prehriatiu.
- Nechajte prístroj pred opätovným použitím vychladnúť.
- Povrchová plocha prístroja sa pri používaní zohrieva. Osoby málo citlivé na teplo si musia dávať osobitný pozor.
- Nikdy nevstrkujte cez otvory do prístroja predmety. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli voľne pohybovať a neboli blokované predmetmi alebo dokonca prstami. Dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu vlasov do prístroja. Noste prípadne sieťku na vlasy.
- Ak chcete sňať alebo nasadiť rúčku alebo masážne nastavce, prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Nikdy nezakrývajte zapnutý prístroj (dekou, poduškou, ...)
- Neprevádzkujte prístroj nikdy bez dozoru, obzvlášť keď sú v blízkosti deti.
- Deti, nevládne a postihnuté osoby môžu prístroj prevádzkovať len pod dozorom dospelých osôb alebo musia byť predtým s prístrojom oboznámené.
- Nepoužívať na malých zvieratách / zvieratách.
- Nositelia kardiostimulátorov musia používanie masážneho prístroja konzultovať so svojim lekárom a v žiadnom prípade nemasírovať oblasť okolo srdca.
- Prístroj nikdy nepoužívať pri opuchoch, na popálených alebo poranených miestach na pokožke alebo na tele.
- Okrem toho sa nesmú masírovať: kosti (napr. kĺby, chrčtica), hlava alebo iné citlivé časti tela.
- Nevykonávajúť masáž pri prechladnutiach so zvýšenou teplotou, kŕčových žilách, trombózach, zápale žíl, žltacke, cukrovke, v tehotenstve, nervových ochoreniach (napr. ischias) alebo akútnych zápaloch. V týchto prípadoch konzultujte použitie so svojim lekárom.
- Nepoužívajte prístroj v posteli. Nesmiete nikdy počas používania zaspať.

## 2. Popis prístroja

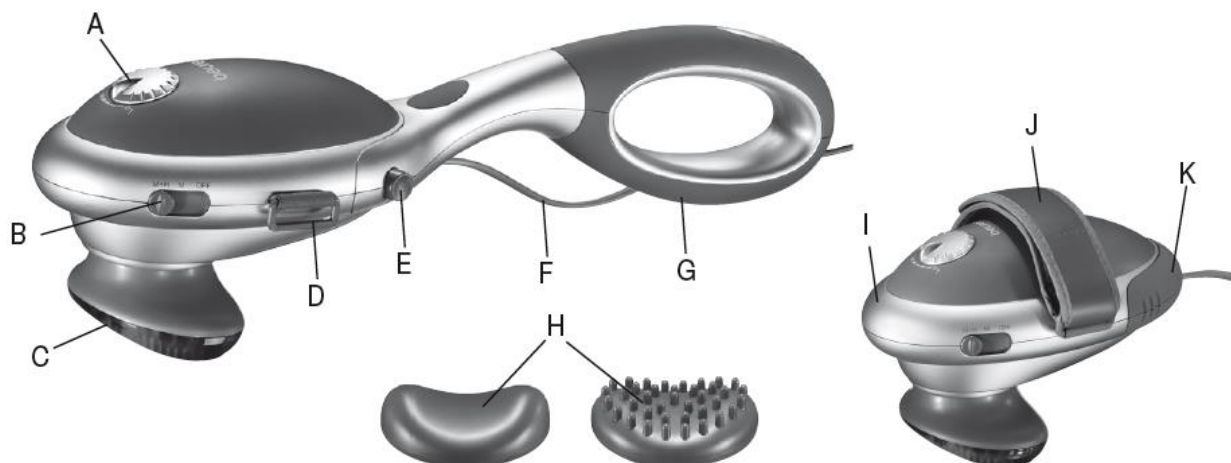

|   |  |
|---|--|
| A - Regulátor (plynulo nastaviteľná rýchlosť masáže)                          | F - Sieťový kábel  |
| B - Posuvný spínač:<br>OFF – vypnuté<br>M – masáž<br>M+H – masáž a infraohrev | G - Nekĺzavá, snímateľná rukoväť   |
| C - Masážna plocha s infraohrevom   | H - Vymeniteľné masážne nástavce<br>– Hladký nástavec<br>– Nástavec s hrboľčkami |
| D - Držiak pre upínací popruh   | I - Masážna hlavica  |
| E - Tlačidlá na aretáciu rukoväte   | J - Upínací popruh   |
|   | K - Zásuvný prvok  |

## 3. Použitie

Účel: Tento prístroj slúži výlučne na masáž ľudského tela.

Rozhodnite sa, či chcete masáž vykonávať s nasadenou rukoväťou alebo prístroj používať bez rukoväte upevnený na ruku upínacím popruhom. Na sňatie rukoväte musíte pevne stlačiť obe tlačidlá slúžiace na aretáciu rukoväte a rukoväť vytiahnuť z masážnej hlavice. Zasuňte v zadnej časti masážnej hlavice zásuvný prvok, aby ste zakryli upevňovací otvor na uchytienie rukoväte.

Prestrčte ruku popod upínací popruh. Pomocou suchého zipsu nastavte dĺžku popruhu tak, aby ste plochou ruky obľapili celú masážnu hlavicu a mohli ju bezpečne viesť.

Ak chcete rukoväť znovu nasadiť, vytiahnite najprv zásuvný prvok a nasadte rukoväť tak, aby citelne zaskočila. Sieťový kábel je vyvedený pod aretáciu rukoväte.

Masáž môžete vykonávať s použitím masážnych nástavcov alebo bez. Vyberte si za týmto účelom masážny nástavec podľa vašich individuálnych požiadaviek. Pri tepelnej terapii infračerveným teplom „M+H“ obmedzujú nasadené masážne nástavce prívod tepla z infračerveného zdroja. Používajte preto prístroj len v polohe „M“, ak je nasadený masážny nástavec.

Skôr, ako pripojíte sieťový kábel, skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Zapnite prístroj pomocou posuvného spínača tým, že ho uvediete do polohy „M“ – „len masáž“ alebo „M+H“ – „masáž s infraohrevom“.

Pomocou regulátora nastavte požadovanú rýchlosť masáže. Priložte prístroj na časť tela, ktorú chcete masírovať.

Môžete sedieť alebo ležať a masírovať seba samého alebo inú osobu.

Silnejším alebo slabším pritlačením masážneho prístroja môžete meniť intenzitu masáže.

Konkrétne miesto na tele nemasírujte dlhšie ako 3 minúty a následne prejdite na iné časti tela.

Po maximálne 20-minútovom použití prístroj vypnite, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Prístroj skladujte na suchom mieste.

## 4. Čistenie

Vypnutý a vychladnutý prístroj čistíte len pomocou zľahka navlhčenej handry. Môžete použiť tiež jemný čistiaci prostriedok. Dávajte však pozor na to, aby sa do vnútra prístroja nikdy nedostala voda. Používajte prístroj znovu až vtedy, keď je úplne suchý.

## 5. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálny úrad kompetentný pre odpadové hospodárstvo.



**KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**  
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:  
**BORGY CZ, a.s.**  
Reklamácie / servis  
Hlučov 1353  
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Česká republika  
Tel.: +420 326 320 662  
E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz)  
[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)